

# Lesões cutâneas provocadas pela utilização de dispositivos médicos: Guia de cortes Mepilex® Lite

Mepilex® Lite protege a pele dos factores de risco extrínsecos que resultam da utilização continuada de dispositivos médicos, como a fricção e a pressão, que causam o aparecimento de úlceras por pressão<sup>1,2</sup>.


Nota: A utilização profilática de pensos para reduzir o aparecimento de uma úlcera por pressão devido à utilização de dispositivos médicos está provada por evidência clínica, no entanto a utilização sob Equipamento de Proteção Individual (EPI), em relação à selagem e impacto na transmissão vírica ainda não foram provados.

- **Pode cortar-se de diferentes formas de maneira a adaptar-se a zonas de difícil acesso**
- **Ao recortar Mepilex Lite, deixe o film posterior no seu lugar**
- **Mepilex Lite, com a camada de contacto de silicone Safetac®, adere suavemente à pele<sup>3</sup>**



**Safetac**  
TECHNOLOGY

Como proteger a pele da utilização de dispositivos médicos (ilustrações e exemplos)



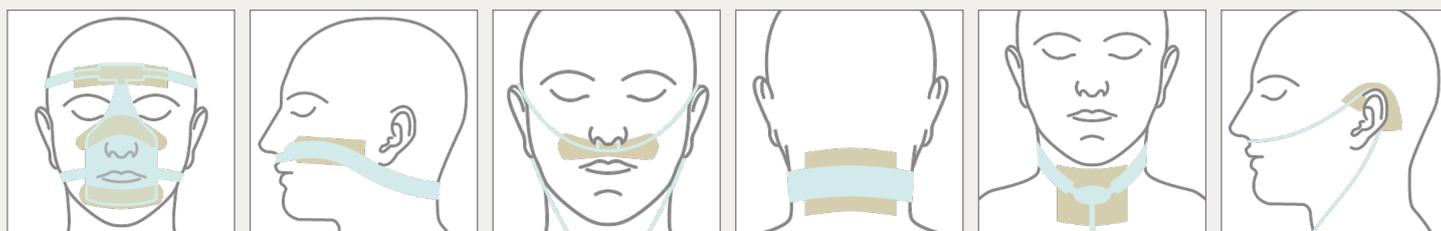


Mepilex® Lite

  
Mölnlycke®

# Guia de cortes

Selecione a medida de penso adequada para cobrir a zona afetada e recorte o penso para personalizá-lo segundo as necessidades do paciente, zonas anatómicas ou dispositivo médico. Aplique o lado aderente sobre a pele.

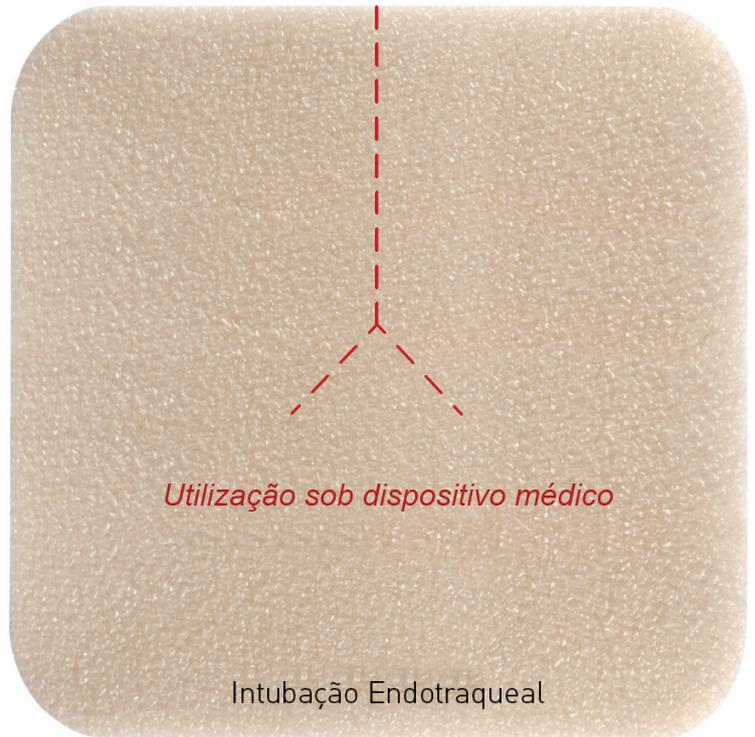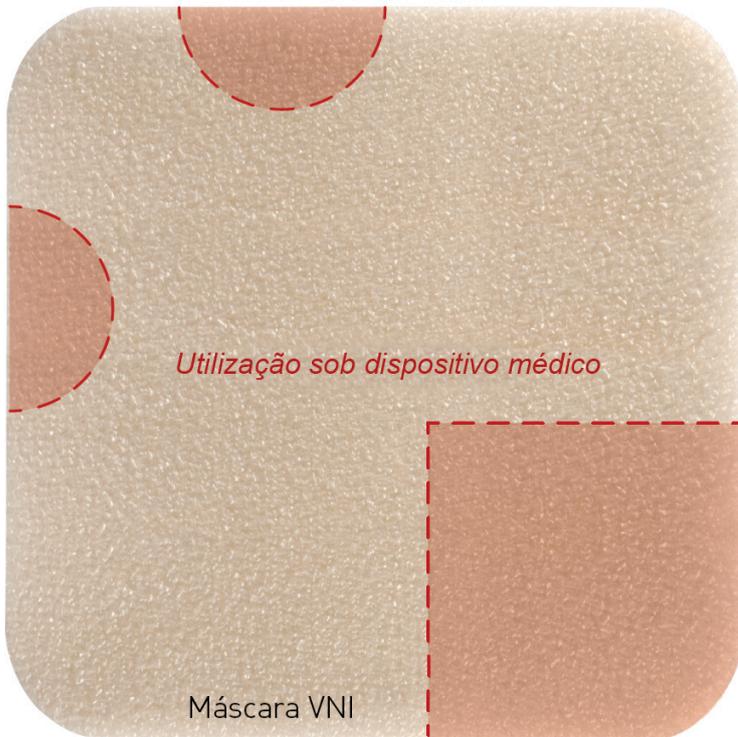
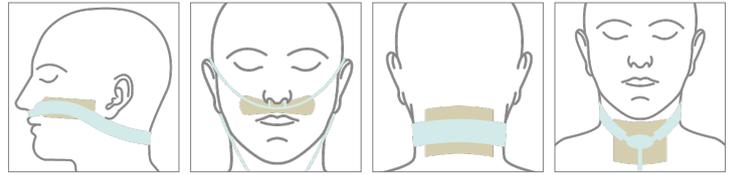


Escala real: Mepilex® Lite 10x10 cm

SafetaC  
TECHNOLOGY

# Guia de cortes

Selecione a medida de penso adequada para cobrir a zona afetada e recorte o penso para personalizá-lo segundo as necessidades do paciente, zonas anatómicas ou dispositivo médico. Aplique o lado aderente sobre a pele.

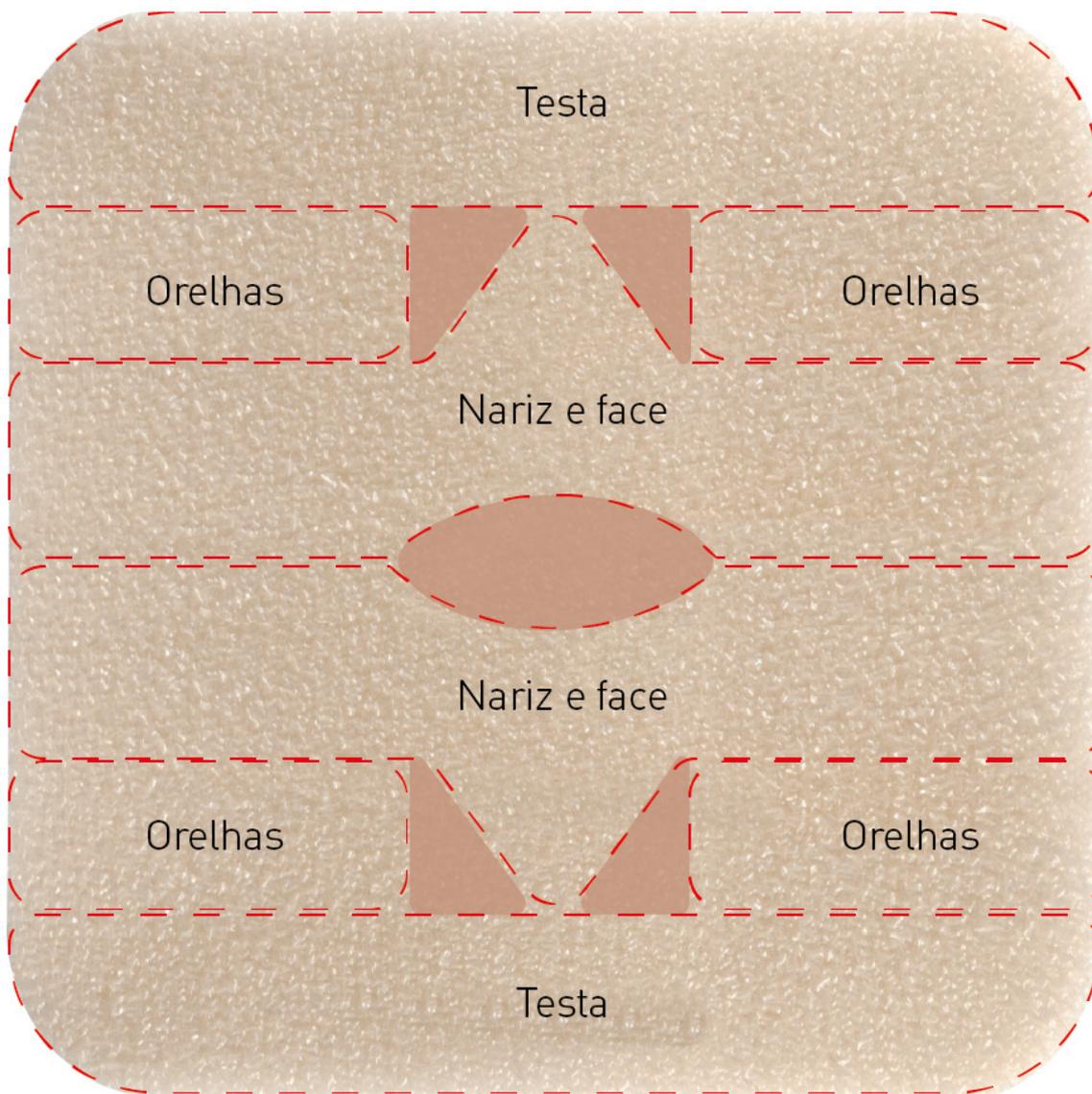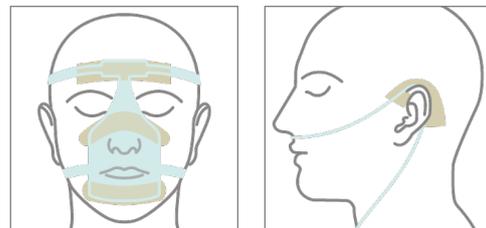

*Utilização sob dispositivo médico*

Escala real: Mepilex® Lite 15x15 cm

**SafetaC**  
TECHNOLOGY

Nota: A informação aqui indicada não deve ser interpretada como prática comum de medicina nem substitui o juízo médico independente de um profissional de saúde. Esta informação que inclui, entre outras, sugestões para o tempo de utilização, seleção e modo de utilização do produto, baseia-se no cuidado global e não considera as características únicas de uma ferida de um paciente. O profissional responsável por casa paciente deve ser o único responsável por avaliar a gravidade das suas feridas e determinar o melhor tratamento para as suas feridas e condições.

Referências: 1. Boesch RP, Myers C, Garrett T et al. Pediatrics. 2012;129: e792-e797. 2. Cohen LP, Ovadia-Blechman Z, Hoffer O, Gefen A. Int Wound J. 2019; 1-14. 3. White, R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008;4(1):14-22.

**Mais informação em [www.molnlycke.pt](http://www.molnlycke.pt)**

Mölnlycke Health Care, Rua Brito Capelo, 807 - 4450-068 Matosinhos. Tel: 800 832 096  
Mölnlycke, Mepilex e Safetac são nomes, logós e marcas registradas globalmente por uma ou mais empresas do grupo Mölnlycke Health Care. © 2020 Mölnlycke Health Care. Todos os direitos reservados. PTWC0058

  
**Mölnlycke**<sup>®</sup>